

BWD 731  
huuhtelu/desinfektiolaite  
sairaaloiden, hoivakotien ja  
klinikoiden tarpeisiin



Yksinkertainen käyttää


Täydellinen desinfiointi

SFS EN ISO 15883:n mukainen



BWD 731 on kehitetty erityisesti sairaaloissa, hoivakodeissa ja klinikoilla tapahtuvaan virtsapullojen, alusastioiden tms. huuhteluun ja desinfiointiin. Laite soveltuu myös eristyshuoneiden vastaaviin tarpeisiin. Fokus on laadussa, joustavuudessa, käyttäjäystävällisyydessä ja turvallisuudessa.

KEN BWD 731 voidaan asentaa seinälle, lattialle tai työtason alle. Pesukammiossa voidaan kerralla prosessoida esim. 1 alusastia tai 2 virtsapulloa. Tietokoneohjattu prosessi ja pyörivät pesupäät takaavat tehokkaat ja tasalaatuiset prosessit.

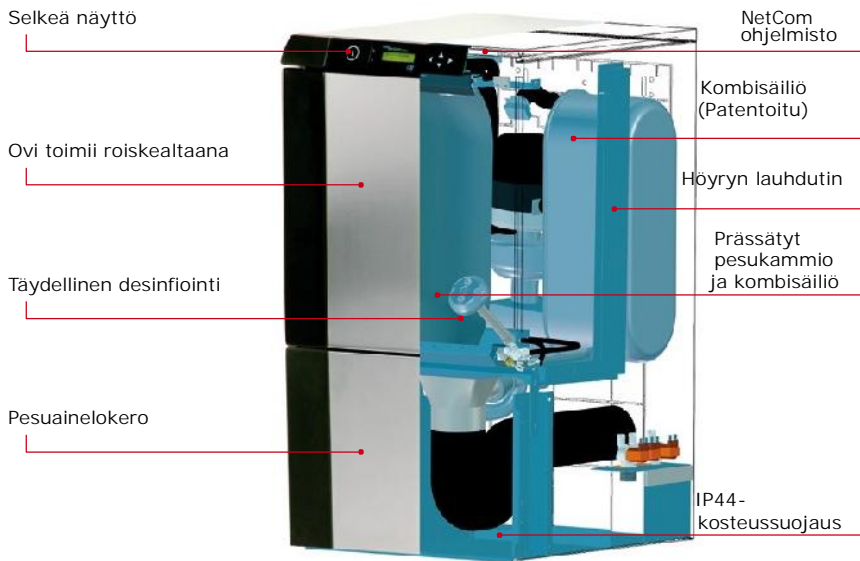

## Tekniikka ja huolto

Kaikki KEN –laitteet ovat EU direktiivien mukaisia ja kaikki terveydenhuollossa käytetyt laitteet täyttävät standardin SFS EN ISO 15883 vaatimukset ja ne on testattu standardin SIS-TR 3:2001 mukaisesti.

KEN-laitteiden maahantuonnista ja huollosta Suomessa vastaa:



**Clinichem Oy Ltd.**

Hallitie 12, 47400 Kausala

[clinichem@clinichem.fi](mailto:clinichem@clinichem.fi)

[www.clinichem.fi](http://www.clinichem.fi)

## Edut :

Selkeä näyttö ohjelmatietoineen.


5 vakio-ohjelmaa. Ohjelmien muokkausmahdollisuus

Suuttimien, pesupäiden, putkistojen, kombisäiliön ja pumpun täydellinen desinfiointi prosessin jälkeen. Estää mikrobikasvun ja nostaa hygieniatasoa (patentoitu)

Automaattinen Quick-start oven suljenta ja prosessin käynnistys

Ovi toimii roiskealtaana. Astia tyhjenee itsestään, mutta vasta oven sulkeuduttua.

KEN NetCom yhteys ulkopuolisiin järjestelmiin dokumentaation siirtämiseksi ja etähuoltoa varten.

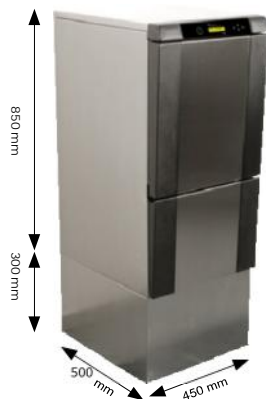

## Varusteet

KEN- laitteisiin on saatavana runsaasti lisävarusteita eri tarpeisiin, tarvittaessa mittatilaustyönä

## Spesifikaatio

Sähkö	3N~400V, 50Hz
Teho/Sulake	9kW/16A tai 6kW/10A
Vesiyhde	Kylmä raakavesi, ¾" RG, 5-30°C, 0-3°dH
Vesiyhde	Lämmin, pehmenetty vesi, ¾" RG, 30-70°C, 0-3°dH
Syöttöveden paine	200-800 kPa
Poisto	Ø 90 mm P/S, lattia tai seinä
Ohjelmat ja veden kulutukset	
Huuhteluohjelma	1 pesuvaihe, 7 l
Virtsapullo-ohjelma	2 pesuvaihetta, 14 l
Alusastiaohjelma, medium	3 pesuvaihetta, 21 l
Alusastiaohjelma, pitkä	5 pesuvaihetta, 35 l
Pesuvatiohjelma	3 pesuvaihetta, 21 l
Pesuainepumppu	Vakiovaruste
Pesuainelokero	1:lle 5 l:n astialle
Pesupumppu	298 l/min. , 0,75kW
Pesukammion koko kork x lev x syv	460 x 380 x 280 mm
Melutaso	62.5 dB(A) (äänen paine)
Tiiveysluokka	Vakio: IP 21, Extra: IP 44