

steriCLIN[®]
VP MEDICAL PACKAGING

Clinichem 



Tuotekatalogi

- Sterilointipakkausmateriaalit

VP

Sisältö

Sterilointipakkaukset ja steriloinnin aputarvikkeet

Sivu	Tuote
1	Paperi-laminaattipussit, sileät
2	Paperi-laminaattipussit, palkeelliset
3	Paperi-laminaattirullat, sileät ja palkeelliset
4	Kuitukangas-laminaattipussit ja rullat, sileät
5	Sterilointipussi, paperi, palkeellinen
6	Tyvek [®] -laminaattipussit ja -rullat
7	Sterilointikääre, kreppipaperi
8	Sterilointikääre, kuitukangas 52g
9	Sterilointikääre, Interleaved kuitukangas 52 g sininen/vihreä
10	Sterilointikääre, kuitukangas 59g
11	Sterilointikääre, täyssynteettinen polypropeeni, SMMMS 34g
12	Sterilointikääre, täyssynteettinen polypropeeni, SSMMS 43g
13	Sterilointikääre, Interleaved SSMMS 43g/kuitukangas 57g
14	Trayliner
15	Tunnistus- ja jäljitysliuskat
16	Absorbentti Trayliner kontainereihin
17	Suojapussit
18	Lokerikkopussi
19	Sauman yhtenäisyydestä ISO 11607:n mukaan

Valmistus:

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH

Industriestrasse 6
D-91555 Feuchtwangen

Saksa
www.vp-group.de



Maahantuonti ja myynti:

Clinichem Oy Ltd.


Hallitie 12
47400 Kausala

www.clinichem.fi
clinichem@clinichem.fi




Paperi-laminaattipussit, sileät - ISO 11607, CE. Pussin avausauma muotoiltu optimaalisesti puhtaan avauksen sekä mahdollisimman suuren pakkaustilan saavuttamiseksi.

Valmistajan tuotekoodi	Toimittajan tuotekoodi	Koko cm	Kpl/laatikko
3FKFB210102	VP2495	5,5 x 20	2.000
3FKFB210104	VP1934	5,5 x 25	2.000
3FKFB210106	VP1933	7,5 x 15	2.000
3FKFB210108	VP1956	7,5 x 20	2.000
3FKFB210110	VP1935	7,5 x 25	2.000
3FKFB210112	VP1936	7,5 x 30	2.000
3FKFB210114	VP1921	10 x 15	2.000
3FKFB210116	VP1937	10 x 20	2.000
3FKFB210118	VP1938	10 x 25	2.000
3FKFB210120	VP1939	10 x 30	2.000
3FKFB210122	VP1922	10 x 36	1.000
3FKFB210124	VP1944	10 x 40	1.000
3FKFB210126	VP1923	10 x 52	1.000
3FKFB210128	VP1901	12,5 x 25	2.000
3FKFB210130	VP1903	12,5 x 30	2.000
3FKFB210132	VP1206	12,5 x 40	1.000
3FKFB210134	VP1947	12,5 x 52	1.000
3FKFB210136	VP1940	15 x 20	1.000
3FKFB210138	VP1961	15 x 27	1.000
3FKFB210140	VP1941	15 x 30	1.000
3FKFB210142	VP1942	15 x 38	1.000
3FKFB210144	VP1948	15 x 61	1.000
3FKFB210146	VP1924	16 x 22	1.000
3FKFB210148	VP1957	20 x 27	1.000
3FKFB210150	VP1943	20 x 40	1.000
3FKFB210152	VP1926	20 x 61	1.000
3FKFB210154	VP2496	21 x 33	1.000
3FKFB210156	VP1904	22 x 30	1.000
3FKFB210158	VP1907	22 x 35	1.000
3FKFB210160	VP1207	22 x 42	1.000
3FKFB210162	VP2498	25 x 38	1.000
3FKFB210164	VP1945	25 x 40	1.000
3FKFB210166	VP2499	25 x 42	1.000
3FKFB210168	VP1946	25 x 48	500
3FKFB210170	VP800822	27 x 45	500
3FKFB210172	VP1929	30 x 42	500
3FKFB210174	VP1928	30 x 57	500
3FKFB210176	VP1905	32 x 50	500
3FKFB210178	VP1958	36 x 58	500
3FKFB210180	VP1930	38 x 50	500
3FKFB210182	VP1925	42 x 50	500
3FKFB210184	VP1927	42 x 61	500

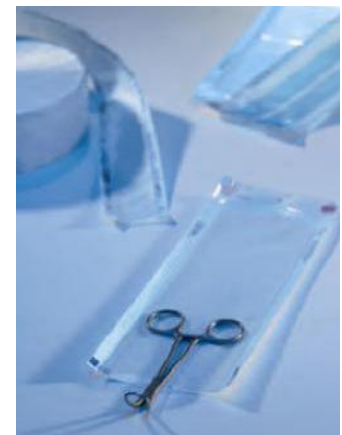

Paperi-laminaattipussi, palkeelliset - ISO 11607, CE

<u>Valmistajan tuotekoodi</u>	<u>Toimittajan tuotekoodi</u>	<u>Koko cm</u>	<u>Kpl/laatikko</u>
3FKSB220102	VP1949	10 x 5 x 30	2.000
3FKSB220104	VP1960	10 x 5 x 40	2.000
3FKSB220106	VP1906	15 x 5 x 28	1.000
3FKSB220108	VP1950	15 x 5 x 40	1.000
3FKSB220110	VP1951	20 x 5 x 40	1.000
3FKSB220112	VP1954	20 x 5 x 48	500
3FKSB220114	VP1953	25 x 6,5 x 48	500
3FKSB220116	VP1952	30 x 6,5 x 61	500
3FKSB220118	VP1959	41 x 6,5 x 61	500

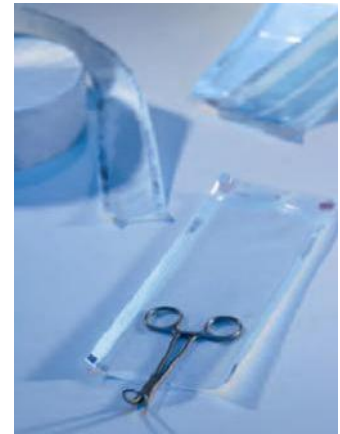

Paperi-laminaattirullat, sileät ja palkeelliset ISO 11607, CE

Stericlin –pussit ja rullat ovat toimiva yleiskonsepti välinehuoltojen sterilointipakkaamiseen. Ne ovat suunniteltu täyttämään kaikki vaatimukset sekä kevyille että painaville instrumenteille ja instrumentiseteille.

Steriloinnin kestävä 70 g/m²:n paperi on mekaanisesti kestävä ja tehokas mikrobieste, mutta läpäisee helposti sterilointikaasut.

Stericlin-pakkauksissa on kolme prosessi-indikaattoria eri sterilointimenetelmiin. Kaikki värikemikaalien painatus on sijoitettu pakkausalueen ulkopuolelle.



Sileät rullat, pituus 200 m

Valmistajan koodi	Toimittajan koodi	Leveys cm	Rullaa/laatikko
3FKFS230102	VP2465	5	6
3FKFS230104	VP2466	7,5	4
3FKFS230106	VP2467	10	3
3FKFS230108	VP2525	12,5	2
3FKFS230110	VP2468	15	2
3FKFS230112	VP2469	20	2
3FKFS230114	VP2470	25	2
3FKFS230116	VP2471	30	1
3FKFS230118	VP2472	38	1
3FKFS230120	VP2473	42	1



Sileät rullat, pituus 100 m

Valmistajan koodi	Toimittajan koodi	Lev x kork cm	Rullaa/ laatikk
3FKSS230204	VP2509	7,5 x 2,5	4
3FKSS230206	VP2474	10 x 5,0	3
3FKSS230210	VP2475	15 x 5,0	2
3FKSS230212	VP2476	20 x 5,0	2
3FKSS230214	VP2477	25 x 6,5	2
3FKSS230216	VP2478	30 x 6,5	1
3FKSS230218	VP2479	38 x 8,0	1



Kuitukangas-laminaattipussit ja -rullat – ISO 11607, CE

Nämä läpinäkyvät pakkaukset on valmistettu kuitukangasmateriaalista ja komposiittilaminaatista.

Kuitukangaspakkauksissa yhdistyy kaikki kuitukankaan ja tavanomaisen pakkauksen parhaat puolet.

Erinomainen höyrynläpäisevyys on eduksi kun steriloidaan suuria kokonaisuuksia ja ontelomaisia/huokoisia. Se helpottaa myös kuorman kuivumista ja vähentää kosteusongelmia varsinkin jos on paljon metallia sisältäviä kuormia. Miellyttäviä käsitellä.

Kuitukangas-laminaattipussit, sileät

Valmistajan koodi	Toimittajan koodi	Koko cm	Kpl/laatikko
3FKFB240105	VP1975	27 x 36	500
3FKFB240110	VP1977	32 x 45	500
3FKFB240115	VP1979	40 x 52	250
3FKFB240120	VP1980	50 x 60	250
3FKFB240125	VP1981	57 x 72	250



Kuitukangas-laminattirullat, - pituus 100 m

Valmistajan koodi	Toimittajan koodi	Leveys cm	Rll/laatikko
3FKFS240212	VP2530	20	2
3FKFS240220	VP2535	42	1




Tyvek[®]-laminaattipussit ja -rollat, sileät

Tyvek[®] -pakkausten laatu on saavutettu huolellisella materiaalivalinnalla. Stericlin[®] -pakkauksissa käytetään vain lujinta Tyvek[®]-laatua 1073 B, 75 g/m². Puhdas peeli, sekä erinomaiset tiiveys- ja läpäisyominaisuudet ovat Stericlin[®] Tyvek[®]-pakkauksille ominaista

Tyvek[®] on kuidutettua polyeteenimuovia, jonka valmistaja on DuPont. Tyvek[®] ei sovellu höyrysterilointiin vaan on tarkoitettu käytettäväksi sterilointipakkauksena matalalämpösteriloinnissa, kuten vetyperoksidi, formaldehydi tai etyleenioksidi. Tyvek[®] -pakkaukset eivät juurikaan absorboi sterilointikaasuja.

Tyvek[®]-laminaattipussit, sileät

Koodi	Koko cm	Kpl/laatikko
3FKFB250105	7,5 x 20	1.000
3FKFB250110	10 x 27	500
3FKFB250115	15 x 30	500
3FKFB250120	20 x 40	500
3FKFB250125	25 x 48	500

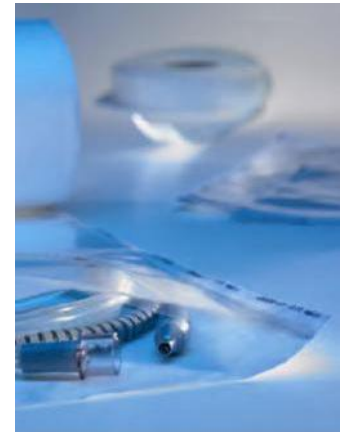

Tyvek[®]-laminaattirullat - pituus 100 m

Koodi	Leveys	Rll/laatikko
3FKFS250204	7,5	2
3FKFS250206	10	2
3FKFS250210	15	1
3FKFS250212	20	1
3FKFS250214	25	1
3FKFS250216	30	1
3FKFS250218	38	1



Paperipussit, palkeelliset - ISO 11607, CE

Stericlin-paperipussit soveltuvat kaikkiin sterilointimenetelmiin paitsi vetyperoksidilla toimiviin. Ne on valmistettu 60 g/m² medical –paperista ja niissä on höyryindikaattori. Ne eivät ole peel-pusseja.

Stericlin-paperipussit ovat kuumasaumattavia, saumauslämpötila on n. 180 °.



Paperipussit, palkeelliset

<u>Koodi</u>	<u>Koko cm</u>	<u>Kpl/laatikko</u>
3FPBT260102	9 x 5 x 16,8	1.000
3FPBT260104	11 x 3 x 19,6	1.000
3FPBT260106	12,5 x 5 x 25,7	1.000
3FPBT260108	14 x 7,5 x 26	1.000
3FPBT260110	14 x 5 x 33,5	1.000
3FPBT260112	16 x 7 x 38,4	500
3FPBT260114	18 x 9,5 x 38,4	500
3FPBT260116	20 x 6 x 33,5	500
3FPBT260118	25 x 10 x 38,4	500
3FPBT260120	38 x 12,5 x 54,9	250

Sterilointikääre, paperikreppi ISO 11607, EN 868, CE

100 % medical-paperia. Hyvä laskeutuvuus. Sopii erityisesti kevyiden instrumenttien ja settien pakkaamiseen..

Noudata kääriinnässä standardin ohjeita.

Valkoinen

Koodi	Koko cm	Arkkiä/pakkaus
3FPAP310102	40 x 40	500
3FPAP310104	50 x 50	500
3FPAP310106	60 x 60	500
3FPAP310108	75 x 75	250
3FPAP310110	80 x 80	250
3FPAP310112	90 x 90	250
3FPAP310114	100 x 100	250
3FPAP310118	120 x 120	125



Vihreä

Koodi	Koko cm	Arkkiä/pakkaus
3FPAP310202	40 x 40	500
3FPAP310204	50 x 50	500
3FPAP310206	60 x 60	500
3FPAP310208	75 x 75	250
3FPAP310210	80 x 80	250
3FPAP310212	90 x 90	250
3FPAP310214	100 x 100	250
3FPAP310218	120 x 120	125

Sininen

Koodi	Koko cm	Arkkiä/pakkaus
3FPAP310304	50 x 50	500
3FPAP310306	60 x 60	500
3FPAP310308	75 x 75	250
3FPAP310312	90 x 90	250
3FPAP310314	100 x 100	250
3FPAP310318	120 x 120	125

Sterilointikääre, kuitukangas 52g ISO 11607, EN 868, CE

Stericlin -kuitukangas 52g on kääre jolla on erinomainen laskeutuvuus ja mekaaninen lujuus. Se soveltuu hyvin erilaisten välineiden ja kokonaisuuksien käärintään.

Noudata käärintässä standardin ohjeita.



Kuitukangas 52g, sininen

Koodi	Koko cm	Arkkia/pakkaus
3FVLI330104	50 x 50	500
3FVLI330106	60 x 60	500
3FVLI330108	75 x 75	200
3FVLI330112	90 x 90	200
3FVLI330114	100 x 100	200
3FVLI330116	100 x 140	100
3FVLI330118	120 x 120	100
3FVLI330120	120 x 140	100
3FVLI330124	130 x 150	100
3FVLI330126	140 x 140	100
3FVLI330128	150 x 190	100

Kuitukangas 52g, vihreä

Koodi	Koko cm	Arkkia/pakkaus
3FVLI330204	50 x 50	500
3FVLI330206	60 x 60	500
3FVLI330208	75 x 75	200
3FVLI330212	90 x 90	200
3FVLI330214	100 x 100	200
3FVLI330218	120 x 120	100
3FVLI330222	130 x 130	100

Sterilointikääre, Interleaved, kuitukangas 52g sininen/vihreä

ISO 11607, EN 868, CE

Stericlin -kuitukangas 52g on kääre jolla on erinomainen laskeutuvuus ja mekaaninen lujuus. Se soveltuu hyvin erilaisten välineiden ja kokonaisuuksien käärintään.

Interleaved –pakkauksissa vihreä ja sininen arkki on pinottuna vuoron perään. Interleaved –pakkaus tarjoaa lukuisia etuja, Ulko- ja sisäpakkauksen eri värit helpottavat mekaanisten vaurioiden ja reikien havaitsemista lisäten turvallisuutta. Kaksi pakkausmateriaalia samassa pakkauksessa säästää tilaa ja nopeuttaa pakkaamista



Noudata käärintässä standardin ohjeita.

Interleaved kuitukangas, sininen/vihreä 52g

<u>Koodi</u>	<u>Koko cm</u>	<u>Arkkia/pakkaus</u>
3FITL340108	75 x 75	200
3FITL340112	90 x 90	200
3FITL340114	100 x 100	200
3FITL340118	120 x 120	100
3FITL340120	120 x 140	100

Sterilointikääre, kuitukangas 59g

ISO 11607, EN 868, CE

Painavat kokonaisuudet, kuten sterilointikorit ovat sterilointikääreelle suuri haaste. Kääreen täytyy olla mekaanisesti kestävä, sillä on oltava hyvä laskeutuvuus (drapability) ja sne täytyy muodostaa mikrobeilta ja pölyltä instrumentteja suojaava kerros steriloinnin jälkeen. Kuitukangas 59g on erityisesti vaativiin välinehuollon tarkoituksiin kehitetty kääre. Sellukuidun ja polyesterikuidun seos antaa kääreelle hyvän mekaanisen lujuuden. Se soveltuu myös tuplapakkauksen sisäkerrokseksi.



Tuplapakkauksen yhdistelmiksi soveltuvat kuitukangas, SMS-synteettinen kuitukangas ja kreppipaperi.

Noudata käärinnässä standardin ohjeita

Kuitukangas sininen 59g

Koodi	Koko cm	Arkkia/pakkaus
3FVLI350106	60 x 60	500
3FVLI350108	75 x 75	200
3FVLI350112	90 x 90	200
3FVLI350114	100 x 100	200
3FVLI350118	120 x 120	100
3FVLI350126	140 x 140	100

Sterilointikääre, polypropeenikuitukangas SMMMS 34g

ISO 11607, EN 868, CE

SMMMS 34g on polypropeenimuovista valmistettu täyssynteettinen kuitukangas, jolla on erinomainen repäisyjuuus, sitkeys ja laskeutuvuus. Se soveltuu kaikkiin sterilointimenetelmiin. Se on viisikerrosrakenne ns. spunbond -ja meltblown-kuiduista (SMMMS). Ensimmäinen kuiturakenne antaa mekaaniset ominaisuudet ja jälkimmäinen mikrobisuojaominaisuudet. SMMMS 34 g on väritään sininen.



Tuplapakkauksessa soveltuu yhdeksi kerrokseksi kuitukankaan tai kreppipaperin kanssa.

Noudata käärinnässä standardin ohjeita

Polypropeenikuitukangas SMMMS 34g

<u>Koodi</u>	<u>Koko cm</u>	<u>Arkkia/pakkaus</u>
3FSMS355108	75 x 75	200
3FSMS355112	90 x 90	200
3FSMS355114	100 x 100	200
3FSMS355118	120 x 120	100
3FSMS355120	120 x 140	100
3FSMS355126	140 x 140	100
3FSMS355127	140 x 190	75

Sterilointikääre, polypropeenikuitukangas SSMMS 43g

ISO 11607, EN 868, CE

SSMMS 43g on polypropeenimuovista valmistettu täyssynteettinen kuitukangas, jolla on erinomainen repäisylujuus, sitkeys ja laskeutuvuus. Se sopii erinomaisesti kaikkiin sterilointimenetelmiin. Siinä on viisikerrosrakenne ns. spunbond- ja meltblown-kuiduista (SSMMS). Ensimmäinen kuiturakenne antaa mekaaniset ominaisuudet ja jälkimmäinen mikrobisuojaominaisuudet.

SSMMS 43g: eri puolet ovat eri sävyisiä. Toinen puoli on sininen ja toinen violetti. Molemmat puolet voidaan käyttää sekä ulko- että sisäpuolena. Värikoodien käyttöä voidaan näin harjoittaa minipuolisesti yhdellä materiaalilla.

Tuplapakkauksessa soveltuu yhdeksi kerrokseksi kuitukankaan tai kreppipaperin kanssa.

Noudata käärinnässä standardin ohjeita

Polypropeenikuitukangas SSMMS 43g

<u>Koodi.</u>	<u>Koko cm</u>	<u>Arkkia/pakkaus</u>
3FSMS360104	50 x 50	500
3FSMS360108	75 x 75	200
3FSMS360112	90 x 90	200
3FSMS360114	100 x 100	200
3FSMS360118	120 x 120	120
3FSMS360120	120 x 140	120
3FSMS360126	140 x 140	120
3FSMS360128	150 x 190	48



Sterilointikääre Interleaved, SSMMS 43g / kuitukangas vihreä 57g - ISO 11607, EN 868, CE

SSMMS 43g on polypropeenimuovista valmistettu täyssynteettinen kuitukangas, jolla on erinomainen repäisyjuuus, sitkeys ja laskeutuvuus. Se sopii erinomaisesti kaikkiin sterilointimenetelmiin. Siinä on viisikerrosrakenne ns. spunbond- ja meltblown-kuiduista (SSMMS). Ensimmäinen kuiturakenne antaa mekaaniset ominaisuudet ja jälkimmäinen mikrobisuojaominaisuudet

Kuitukangas 57g vihreä on seos synteettisistä ja luonnonkuiduista. Sillä on erinomainen laskeutuvuus sekä mekaaninen lujuus. Kuituseos edesauttaa kuivumista steriloinnin jälkeen..

Tässä Interleaved-yhdistelmässä siniset ja vihreät arkit on pakattu samaan pakkaukseen vuoron perään. Ei tarvita kahta erillistä pakkausta, Ulko- ja sisäpakkauksen eri värit helpottavat mekaanisten vaurioiden ja reikien havaitsemista lisäten turvallisuutta.

Tämä Interleaved –yhdistelmä yhdistää SSMMS:n erinomaisen lujuuden ja seoskuituisen kuitukankaan kuivamista edesauttavat ominaisuudet.

Noudata käärinnässä standardin ohjeita



Interleaved täyssynteettinen kuitukangas SSMMS 43g / kuitukangas 57g vihreä

<u>Koodi</u>	<u>Koko cm</u>	<u>Arkkia/pakkaus</u>
3FITL370108	75 x 75	200
3FITL370114	100 x 100	200
3FITL370118	120 x 120	120
3FITL370126	140 x 140	120

Stericlin[®] Trayliner suojaa käärettä vaurioilta

Joustava sterilointipakkaus, joka perustuu korien käärintään on kustannustehokas ja toimiva.

Stericlin[®] Trayliner on tarkoitettu optimoimaan käärintään perustuvan pakkaamisen edut. Se on valmistettu kestävästä kreppipaperista. Se suojaa sterilointikärettä korin käsittelystä johtuvilta kolhuilta ja vaurioilta sekä terävien välineiden puhkaisulta. Trayliner muodostaa tasaisen pohjan ja vähentää kääreen rikkoutumisen riskiä sitä liikuteltaessa. Materiaali absorboi prosessissa kondensoitunutta kosteutta, joka vahvistaa sterilointiprosessin kuivausvaiheen vaikutusta



Käyttö: Aseta Stericlin[®] Trayliner -arkki sterilointikorin alle korin ja kääreen väliin ja korin kuormauksen jälkeen suorita käärintä normaalisti. Traylinerin reunat automaattisesti taittuvat ylös korin seinää vasten ja muodostavat suojaavan kerroksen.

Trayliner valkoinen

Koodi.	Koko cm	Pack (pcs.)
3FTSZ420102	25 x 25 *) Ulkomitat 35 x 35	500
3FTSZ420104	48 x 25 *) Ulkomitat 58 x 35	500
3FTSZ420110	58 x 35	500

*) Traylinerin mitat ylittävät korimitan 5 cm:llä joka sivulta

Stericlin[®] - tunnistus- ja jäljitysliuskat

Helppo tapa välineiden tunnistamiseen ja jäljittämiseen

Liuskoja voidaan käyttää esim. huoltoon meneville instrumenteille, korien tunnistamiseen (vajaa kori, täysi kori...) jne.



Stericlin[®] tunnistus- ja jäljitysliuskat

Koodi	Tuote	Kpl/pakkaus
3FTSZ430102	Liuska, valkoinen	1.000
3FTSZ430104	Liuska, oranssi	1.000
3FTSZ430106	Liuska, sininen	1.000
3FTSZ430108	Liuska, vihreä	1.000
3FTSZ430110	Liuska, keltainen	1.000

Trayliner sterilointikontainereihin

Absorboi kosteutta kotainereiden sisällä

Kosteus ja märät kontainerit ovat vaara joka voi estää onnistuneen steriloinnin. Absorbentti Trayliner asettuu pohjanmyötäisesti kontainerin pohjalle ja absorboi kontainerin sisällä olevan kosteuden ja edesauttaa kuivausta.

Terävät ja kärjelliset instrumentit voivat vaurioitua jos kontaineria käsitellään varomattomasti. Trayliner kontainerin korissa ehkäisee instrumenttien vaurioitumista kovassa käsittelyssä merkittävästi.

Huom! Absorbentti Trayliner ei ole sama kuin kuitukangaskääre eikä sitä voi käyttää käärintään.



Absorbent trayliner blue

Article-No.	Size in cm	Pack (pcs.)
3FCZB440102	25 x 30	1.000
3FCZB440104	30 x 50	500

Suojapussi, jossa sulkuteippi

Suojapussi on tarkoitettu antamaan lisäsuoja steriloiduille välineille kuljetuksen tai pitkäkestoisen varastoinnin ajaksi. Suojapussilla voidaan pidentää steriloinnin jälkeistä säilyvyysaikaa. Suojapussi ei ole läpäisevä.

Huom! Pakattavat välineet on oltava kunnolla jäähtyneitä ennen pakkaamista suojapussiin. Ennen suojapussin avaamista suojauksen jälkeen on pussin pinnalla oleva pöly puhdistettava



Suojapussi

Koodi	Koko cm	Kpl/laatikko
3FSSV510102	20 x 30	1.000
3FSSV510106	25 x 40	500
3FSSV510108	25 x 120	500
3FSSV510110	30 x 50	500
3FSSV510112	42 x 70	500
3FSSV510114	60 x 50	100
3FSSV510116	60 x 75	100
3FSSV510118	70 x 100	100

Stericlin[®] -lokerikkopussi

Välineiden suojaamiseen ja järjestelyyn. Atulat, sakset, veitsien kädensijat, anturit ja muut välineet asetellaan usein sekaisin instrumenttikoriin, ja esim. kaarimaljaan. Instrumentit voivat tällöin vaurioitua kuljetuksessa. Niitä on myös hankala löytää, jos ne putoavat maljasta

Stericlin[®] lokerikkopussi suojelee välineitä vaurioilta ja pitää ne järjestyksessä. Lokerikkopussissa on steriloinnin kestävä kuitukangas/laminaattirakenne.

Lokerikkopussi on jaettu osiin, lokeroihin, joihin välineet asetellaan ja ne pysyvät näin järjestyksessä, pysyvät kuljetuksessa paikallaan ja ovat suojattuna.

Huom!! Tämä tuote ei ole sterilointipakkaus. Instrumenttien asettelun jälkeen pussi voidaan taittaa tai kevyesti rullata ja asettaa sterilointikoriin tai –kontaineriin tai muuhun sterilointipakkaukseen sterilointia varten. Lokerikkopussit ovat kertakäyttöisiä

Lokerikkopussi

Koodi	Koko cm	Kpl/laatikko
3FSZB730120	52 x 21	250



Pussin sauman eheystesti ISO 11607:n mukaan

Päivittäin tehtävien suljentaumojen on täytettävä monet vaatimukset. Sterilointipakkausstandardi EN 868-5 edellyttää yhtenäistä saamaa jolla on tietty lujuus sekä ennen että jälkeen steriloinnin.

ISO 11607-1 menee vielä pidemmälle edellyttäen saumaus- ja pakkausprosessin validointia.

Stericlin[®] sauman eheystesti on yksikertainen menetelmä sauman eheys. Testi suoritetaan erityisellä, värillisellä testiliuoksella, joka paljastaa sauman epäyhteneväisyyskohdat.



Sauman eheystesti

Koodi	Tuote	Kpl/pakkaus
3FSZB830102	Seal seam integrity test	1