

Höyryautoklaavisarja **S2000**



S2000


Höyryautoklaavit

TURVALLISUUS


Matachana S2000 –sarjan autoklaaveissa yhdistyvät turvallisuus, tehokkuus ja suuri kapasiteetti. Toteutetut tekniset ratkaisut ja rakenne takaavat täydellisen sterilointiprosessien kontrolloinnin. S2000-sarjan laitteet täyttävät Euroopassa suurille autoklaaveille asetetun standardin SFS-EN285 + A2:en vaatimukset. Laitteet on valmistettu ISO9001 ja ISO13485 –laatujärjestelmien periaatteiden mukaisesti.

OMINAISUUDET

- SFS-EN285+A2:en mukainen
- Sterilointikammio, vaippa, venttiilit ja putkistot haponkestävää AISI316 terästä
- Operointi kosketusnäytöltä, prosessinohjaus tehokkaan teollisuustietokoneen avulla
- Laboratoriolaatuiset, helposti irrotettavat putkiyhteet (Clamp)
- Integroitu, moderni, Venturi-putkiperiaatteeseen perustuva vakumointi, joka on tehokas, nopea, hiljainen, lähes huoltovapaa ja säästää vettä.
- Automaattiset liukuovet turvakytkimillä
- Validointiyhteet ja läpiviennit
- Numeerinen tulostin prosessitiedon tallennukseen.
- Kaksikanavapiirturi prosessiparametrien seurantaan (lisävaruste)
- Automaattiset kuormaus/purkausradat (lisävaruste)
- Tiivistymättömien kaasujen rekisteröinti
- Korkeussäädettävät jalat
- Joko lattian päälle tai lattian sisään (monttuun) asennettava
- Sekä höyryn kehittimellä että laitoshöyrykäyttöisenä

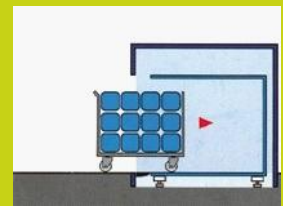

Kuormaus lattiatasolta

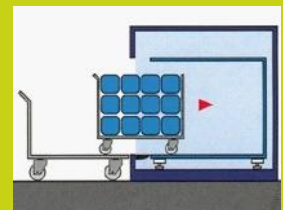

Kuormaus vaunusta

Malli	S2009V		S2012V		S2018V	
	1 -ovinen	2 -ovinen	1 -ovinen	2 -ovinen	1 -ovinen	2 -ovinen
Kapasiteetti (sterilointimoduulia S.M)	9	9	12	12	18	18
Kammiotilavuus (litraa)	892	892	1167	1167	1725	1725
Kammion mitat (mm)						
Leveys	700	700	700	700	700	700
Korkeus	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Syvyys	1070	1070	1400	1400	2070	2070
Ulkomitat (mm)						
Leveys	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Korkeus	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Syvyys	1570	1570	1900	1900	2570	2570
Tehon tarve (kW)	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5
Nettopaino (kg)	2000	2300	2300	2600	2600	2900

Valmistus:



International Division

Almogávers, 174 08018 Barcelona (SPAIN)
Tel. (+34) 93 300 85 04, int@matachana.com
www.matachana.com

Maahantuonti, myynti, huolto:



Clinichem Oy Ltd.

Hallitie 12, 47400 Kausala
p. 05 3818180, clinichem@clinichem.fi
www.clinichem.fi