


Kuivauskaappi
332 - F / 334 - F



Tehokas anestesia- ja muiden
tarvikkeiden kuivaaja
Säästää pesukoneiden prosessiaikaa ja lisää
välinehuollon kapasiteettia

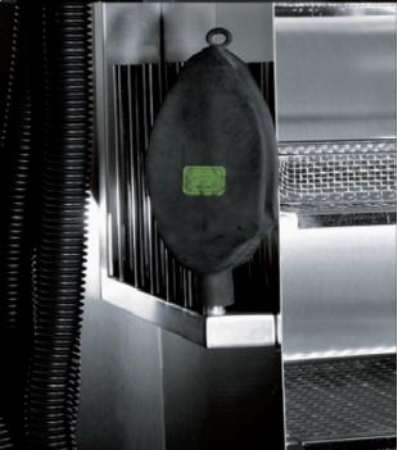

Laatua ilman kompromisseja

Tiesitkö....

- n 332-F/334-F –kuivauskaappi on aikaa säästävää ja siten taloudellinen investointi. Kaappi lisää välinehuolto-osaston pesukapasiteettia lyhentämällä pesukoneiden kuivaukseen tarvittavaa aikaa. 332-F/334-F vapauttaa pesukoneet nopeammin uusiin prosesseihin.
- n Käyttäjäturvallinen design varmistaa hyvän kuormaus/purkausvaiheen ergonomian. Suuri kapasiteetti, 12 anestesialetkun lisäksi 6 hengityspussia voidaan kuormata samaan prosessiin. Laitteessa on myös 4 hyllyä instrumenttikoreille, joissa voidaan kuivata tavanomaisia instrumentteja. Laitetta voidaan käyttää myös anestesiayksikön lämmitykseen.
- n Lasiovi mahdollistaa tarkastelun laitteen sisälle prosessinkin aikana. Optimaalinen eristys ja tarkka lämpötilan säätölogiikka säilyttää asetuspötilän tarkasti koko prosessin ajan. Kuivausilma suodatetaan tehokkaan, elektronisen suodattimen avulla, joka poistaa 99,99% partikkeleista.
- n Kuivauskaappi 332-F/334-F voidaan asentaa seinälle tai lattia-alustalle

Toiminnot ja edut

- n Instrumenttien kuivaus ja lämmitys.
- n Vasen- tai oikeakätisellä ovella
- n Kuivauslämpötilan ja –ajan elektroninen kontrollointi.
- n Tehokas elektrostaattinen suodatin kuivausilman suodatukseen.
- n Tehokas lämmöneristys säilyttää vakioämpötilan kaapissa.
- n Lasiovesta näkee kaappiin prosessin aikana ja voi koska vain todeta kaapin sisällön.
- n Asennettavissa joko seinälle tai alustalle.
- n Kapasiteetti:
 - 2 riviä 6:lle anestesialetkulle, yhteensä 12:lle.
 - telineet 6:ll hengityspussille
 - 4 hyllyä instrumenttikoreille
- n Mitat:
 - Korkeus 160/180 cm
 - Leveys 60 cm
 - Syvyys 40 cm
 - Kuivauslämpötila 50 °C
 - Kuivausajat 20/40/60 min.
 - Kuivausilman virtaus n. 60 m³/h
 - Tehon tarve 1400 W
 - Sulake 10A
 - Paino 60 kg
 - Suodatusteho 99.99% kaikista partikkeleista

Maahantuonti, myynti, huolto, varaosat:

Clinichem
Clinichem Oy Ltd.
Hallitie 12, 47400 Kausala
p. 05 381 8181
clinichem@clinichem.fi
www.clinichem.fi

iso 9001

iso 13485

iso 14001